

KATARAKT
CERRAHİSİNDE
AKIŞIN
BOZULMASI,
CAN SIKICI
SONUÇLAR
DOĞURABİLİR



HER SEFERİNDE
SORUNSUZ CERRAHİ

VIVINEX™ ISERT® İLE

Hastalarınızın daha net görebilmelerini
hedeflerken, ameliyat esnasında öngörülebilir
bir performans elde edin




Vivinex™ iSert®


iSert® pre-loaded enjektör sistemi ile birlikte sunulan Monofokal Göz İçi Lens

MODEL XY1

HOYA
SURGICAL OPTICS

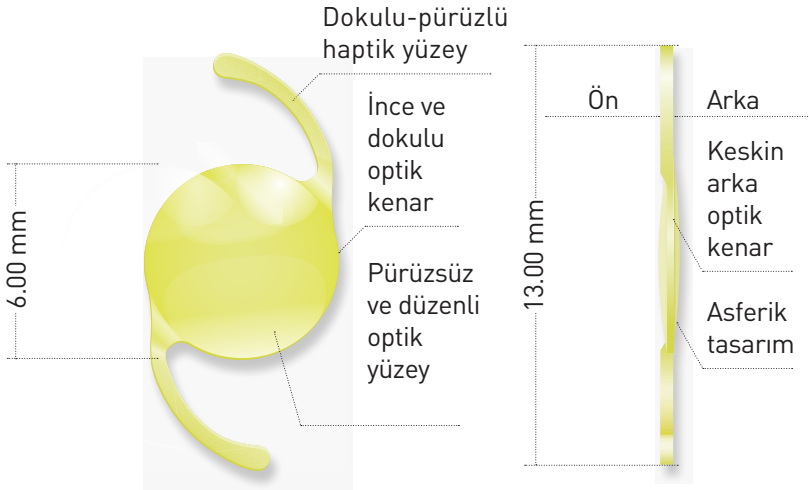

Vivinex™ iSert®

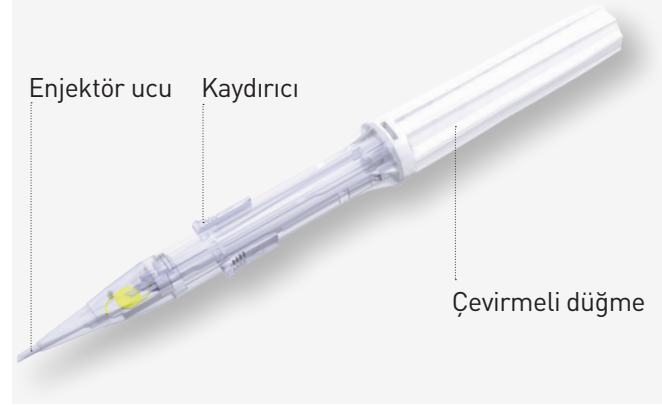

Vivinex™ iSert®				
Model Adı	XY1			
Optik Tasarım	Keskin, ince ve dokulu optik kenara sahip asferik tasarım			
Optik ve haptik materyaller	UV ve mavi ışık filtresine sahip Hidrofobik akrilik Vivinex™			
Haptik tasarım	Dokulu-pürüzlü haptik yüzey			
Çap (optik toplam uzunluk)	6.00 mm / 13.00 mm			
Güç	+6.00 to +30.00 D (in 0.50 D increments)			
Nominal A-sabiti *	118.9			
Optimize sabitler **	Haigis	a ₀ = -1.0459	a ₁ = 0.2547	a ₂ = 0.2291
	Hoffer Q	pACD = 5.700		
	Holladay 1	sf = 1.928		
	SRK/T	A = 119.193		
Enjektör	Vivinex™ iSert® pre-loaded			
Enjektör uç kısmı dış çapı	1.70 mm			
Önerilen kesi boyutu	2.20 mm			



HOYA SURGICAL OPTICS,
ULUSLARARASI WEB
SİTESİ ÜZERİNDEN ÜRÜN
BİLGİLERİNE ULAŞMAK
İÇİN KARE KODU
OKUTUNUZ.

* A-sabiti, lens gücü hesaplamaları için bir başlangıç noktası olarak sunulmaktadır. Kesin lens gücünün hesaplanmasında, kullanılan ekipman ve cerrahın kişisel deneyimine dayalı olarak bireysel hesaplamaların yapılması önerilir.

** Vivinex™ XY1 için IOLCon web sitesinde (<https://iolcon.org>) yayımlanan göz içi lens gücü hesaplamasına yönelik bu optimize sabitler, sırasıyla 2.857 ve 2.884 klinik sonuç temel alınarak 10 Haziran 2024 itibarıyla hesaplanmıştır. Bu sabitler, gerçek cerrahi veriler temel alınarak oluşturulmuş olup, bireysel sabit optimizasyonları için bir başlangıç noktası olarak IOLCon tarafından sağlanmaktadır. Web sitesinde yer alan bilgiler, diğer kullanıcıların sağladığı verilere dayanmakta olup HOYA Surgical Optics (HSO) tarafından oluşturulmamıştır. Bu nedenle HSO, söz konusu web sitesinde yer alan içeriklerin doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği konusunda herhangi bir garanti vermez.



2024-08-20_HS0E_XC1_XY1_DS_TR 07.2025_Optisa_Vivinex_0007

Bu belgede yer alan bilgiler sağlık profesyonellerine yöneliktir. Lütfen ürünün amaçlanan kullanımı ile endikasyonlar ve kontrendikasyonların tam listesi için Kullanım Talimatlarına başvurunuz. HOYA Surgical Optics uluslararası websitesinde yer alan bazı ürünler, özellikler ve prosedürler ülkenizde onaylanmamış olabilir ve bu nedenle kullanıma sunulmamış olabilir. Tasarım ve teknik özellikler, sürekli teknik geliştirmeler nedeniyle önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin ülkenizdeki kullanılabilirliği ile ilgili detaylı bilgi için lütfen bölgenizdeki temsilcimizle iletişime geçiniz. HOYA, Vivinex ve multiSert, HOYA Corporation veya bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markalarıdır. ©2024 HOYA Medical Singapore Pte. Ltd. All rights reserved. HOYA Medical Singapore Pte. Ltd. 10 Biopolis Road #04-01/06, Chromos, Singapore 138670, SINGAPORE HOYA Surgical Optics GmbH | De-Saint-Exupery-Str. 10 | 60549 Frankfurt am Main | Germany | Hotline DE: Tel. +49 (0)800 664 2 664 | Fax +49 (0)800 774 2 774 hoyasurgicaloptics.com

Optisa Medikal Çözümler A.Ş. / HOYA Surgical Optics Türkiye & Azerbaycan Distribütörü
Tatlısu mah. Şenol Güneş Bld. Mira Tower A blok No:2A/57, Ümraniye, İstanbul, Türkiye Email: info@optisa.com.tr

optisa
HOYA
SURGICAL OPTICS